

Инструкция по работе с разрешительным режимом в ПО СкладСМ


С 1 июня 2025 года становится обязательной, онлайн проверка кодов маркировки при продаже на кассе для Лекарственных средств

Для корректной работы разрешительного режима для ЛС в ПО СкладСМ, необходимо:

1. Обновить СкладСМ до версии не ниже 1_1_6_1623
2. Обновить утилиту проверки ГИС МТ до версии не ниже 4.03
3. Версия ФФД на кассе не ниже чем 1.2
4. Обновить ДПЛ для кассового оборудования

Описание работы разрешительного режима

1. Сканируем код маркировки ЛС и добавляем их в чек.
2. При добавлении в чек, всплывает сообщение о проверке кода.

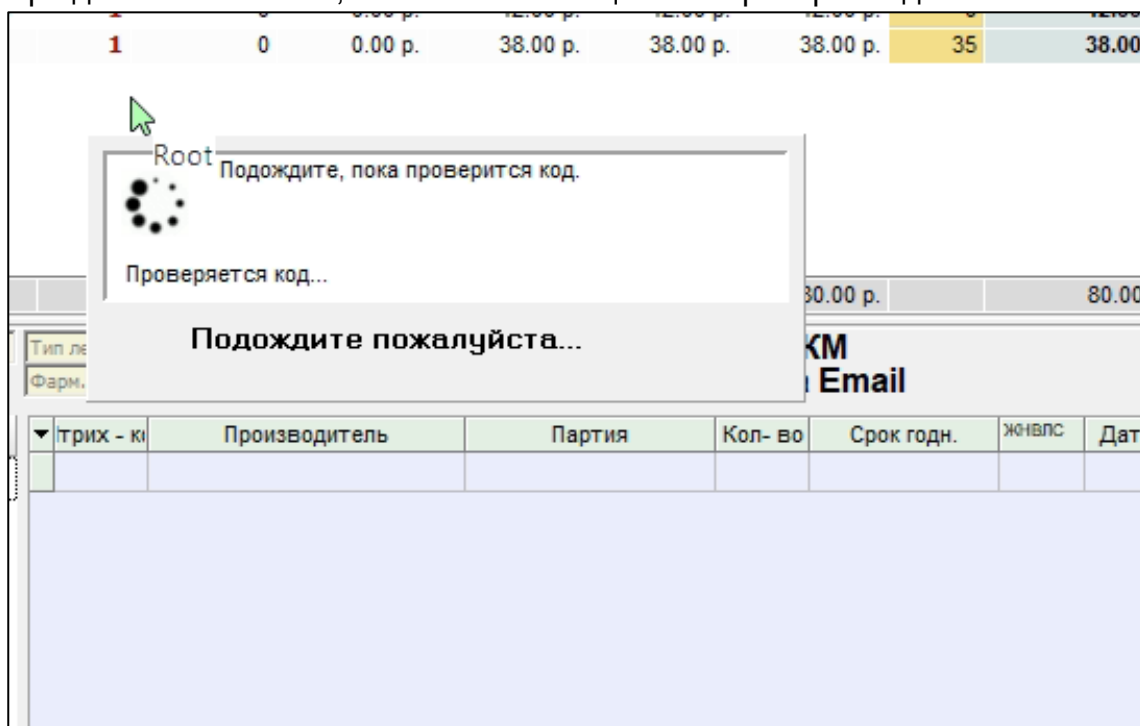


3. В случае успешного прохождения проверки, напротив названия препарата в столбце «ГИС МТ» будет соответствующая индикация - **салатового цвета**


Наименование	Кол-во	Цена продажи	Всего	ГИС МТ	Описание ошибки
ИНО CONSUMED 500МЛ N1 ФЛ	1	279.00 р.	279.00 р.		

4. В случае, если код не прошёл проверку при попытке закрыть чек появится всплывающее окно с предупреждением, напротив препарата в столбце «ГИС МТ» будет индикация - **красного цвета**, и в столбце «Описание ошибки», будет

отображаться краткое описание ошибки. Продажа товара с ошибками будет заблокирована.

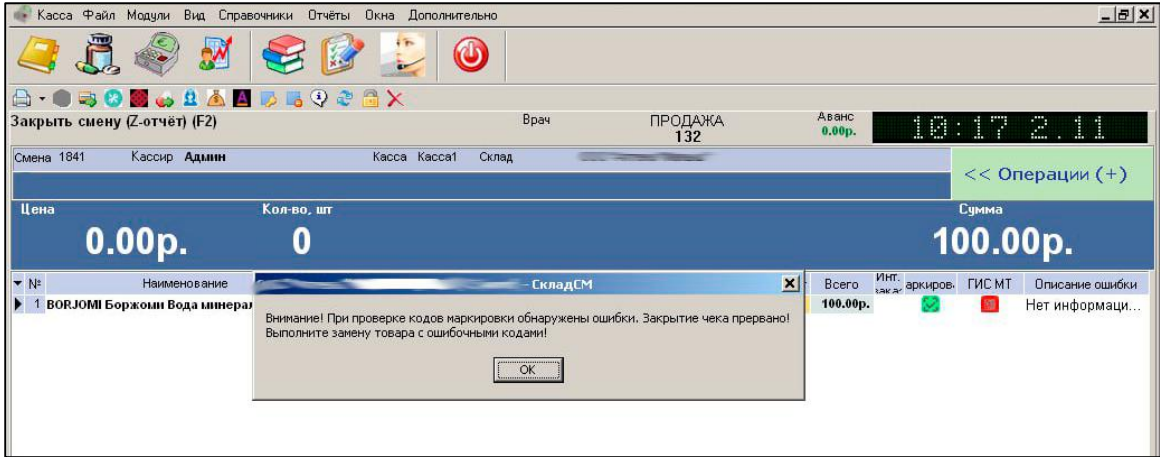

5. В модуле «Анализ продаж» будет доступен отчёт по ошибкам ГИС МТ

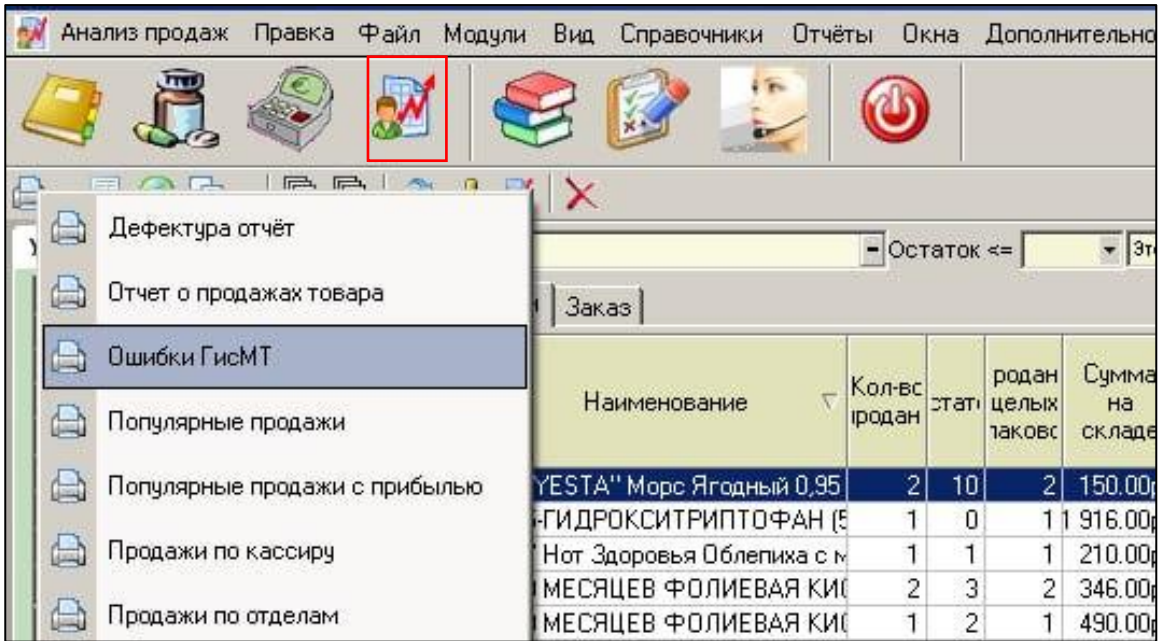

Ошибки проверки в ГИСМТ					
Начало периода: 01.09.2024 00:00:00					
Конец периода: 30.10.2024 23:59:59					
Дата продажи	№ чека	№ ФД	Наименование КИЗ	Описание ошибки	
18.09.2024 12:16:23	131	30587	Петушок Карамель леденцовая с Zn и витамином	Код идентификации не найден в ГИС МТ 0104620760953864215HYTe(37)DT,Q:c91EE10928keREwJ0LoINOGEpx22qBeCv5CbYJTrxE7sfmIDk8=	
21.09.2024 20:20:17	1	31264	Настойка Боровая матка Радуга Горного Алтая	Код маркировки эмитирован, но нет информации о его нанесении 010460706880054215nSBtPAAYZvR91EE1092SbEP7vtheiKZfCn2xZUNIfUQydr6bxBMqDv6a3GocU=	
25.09.2024 13:57:03	124	31975	Гематоген Традиционный+ с воздушной кукурузой	Код маркировки эмитирован, но нет информации о его нанесении 0104606371006144215QvTmN1:a6t3i93AG5q	
25.09.2024 14:24:31	129	31980	КОЛЛАГЕН 6000 мг с витамином C ANTI-AGE	Код идентификации не найден в ГИС МТ 0104602242021414215grKLWG?G5T6x91EE0992N1vy7idVqG+3DFv5OPNE6Mu13RYXvDuDwbBDow/A0A=	
28.09.2024 7:36:12	74	32552	Облепиховое масло Камелия 100мл N1 фл	Код маркировки эмитирован, но нет информации о его нанесении 010460371300058721542xhGsvAC3Z91EE1092GuDMLg57MGTVM/UAluoUTTrqNJXtmCJ0dUBPvfuFB34=	
11.10.2024 20:03:14	198	35112	Гематоген Русский с кокосом в глазури плитка 40г	Код маркировки эмитирован, но нет информации о его нанесении 0104610008494198215TU)KZ)Rtkf93O+mY	
12.10.2024 22:48:21	48	35373	Гематоген Русский с кокосом в глазури плитка 40г	Код идентификации выведен из оборота 0104610008494198215TmkdIfJQq0LH93y+xc	
14.10.2024 18:47:42	131	35628	Гематоген Русский с кокосом в глазури плитка 40г	Код маркировки эмитирован, но нет информации о его нанесении 0104610008494198215tT34yA)1*J6U93o37r	
14.10.2024 18:48:12	131	35628	Гематоген Русский с кокосом в глазури плитка 40г	Код маркировки эмитирован, но нет информации о его нанесении 0104610008494198215TTI QXU:FlakQ93ajWld	

Описание индикации ГИС МТ

	проверка не нужна - продавать можно (Например: лекарства)
	проверка вернула разрешение продажи - продавать можно
	проверка не произведена из-за ошибки на стороне ГИС МТ - продавать можно
	проверка вернула запрет продажи либо проверка не произведена из-за ошибки соединения - нельзя продавать (Обратиться в службу технической поддержки для разъяснения)